



EasyLineImplant<sup>®</sup>

EasyPiece<sup>®</sup>



A close-up, low-angle shot of an hourglass. The top bulb is partially filled with dark, golden-brown sand. A stream of sand is falling from the narrow neck into the bottom bulb. The background is a warm, golden-yellow color, creating a soft, atmospheric glow. The hourglass is centered in the frame, and the text 'All in One' is overlaid on the right side of the neck.

All in One


## EasyPiece®

l'impianto monofasico con  
**MUA** integrato che garantisce  
**Velocità** di intervento e  
**Semplicità** nella finalizzazione  
protesica.



## Vantaggi per il medico

- Eliminazione della connessione tra impianto e moncone MUA, così da non avere problemi di microgap e di infiltrazioni batteriche
- Minori dimensioni della parte tras mucosa rispetto ai monconi MUA tradizionali, con conseguente riduzione dell'ingombro orale generale.
- Ridotte possibilità di svitamento della sovrastruttura protesica, grazie all'utilizzo di una vite con filetto M1.8, maggiore rispetto al filetto tradizionale M 1.4
- Chirurgia ad una fase, si evita la riapertura del lembo accorciando così i tempi di guarigione e di protesizzazione anche in caso di carico ritardato
- In meno di 0,25mm ruota di 180° grazie alla filettatura due principi
- Unico impianto sul mercato che può utilizzare anche la chirurgia guidata
- Ridotto tempo/poltrona

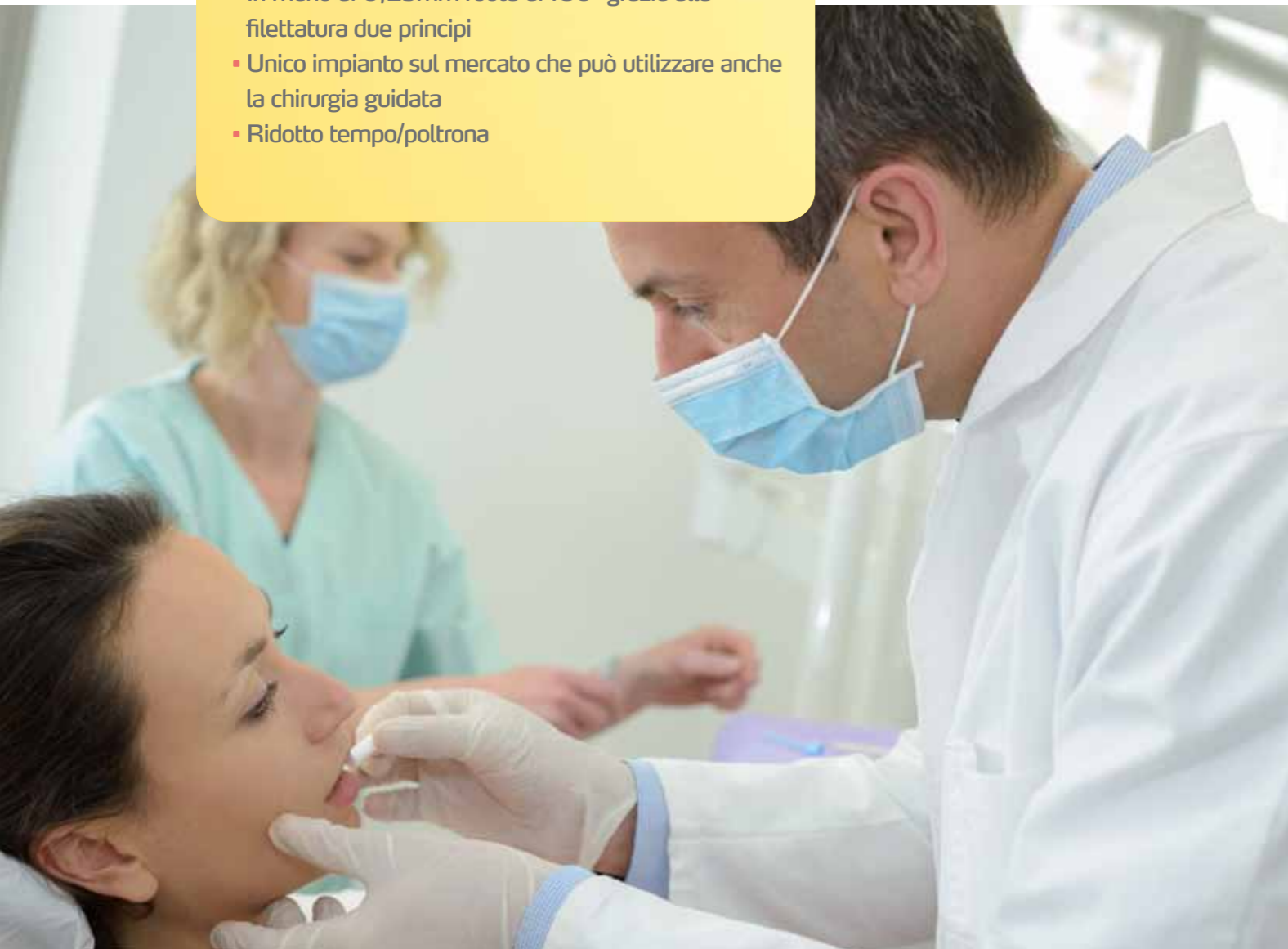

## Vantaggi per il Laboratorio


- La dimensione ridotta della connessione lascia più spazio per la struttura e per il rivestimento estetico.
- La forma della connessione protesica garantisce un miglior sigillo tra il materiale da rivestimento estetico e la struttura metallica.
- La lavorazione della superficie dei componenti protesici aumenta l'adesione con il rivestimento estetico
- I nuovi analoghi da laboratorio sono adatti sia per essere utilizzati con il gesso che per essere inseriti nei modelli prototipati realizzati con le nostre stampanti 3D.





## Dimensioni e caratteristiche dell'impianto

Il nuovo ed esclusivo sistema di implantologia dentale "EASYPiece" è costituito da impianti dentali monofasici la cui parte endossea ricalca per morfologia e filetto gli impianti dentali della linea EasyLine passo fine, mentre quella tras mucosa i monconi MUA di angolazione e altezza tras mucosa differenti: diritto, angolato a 15° e angolato a 30°. EASYPiece è indicato per i casi di riabilitazione estetica e per il ripristino della funzionalità di pazienti affetti da edentulia parziale o totale. E' particolarmente indicato per l'utilizzo con tecnica All on Four e All on Six con chirurgia tradizionale o guidata.

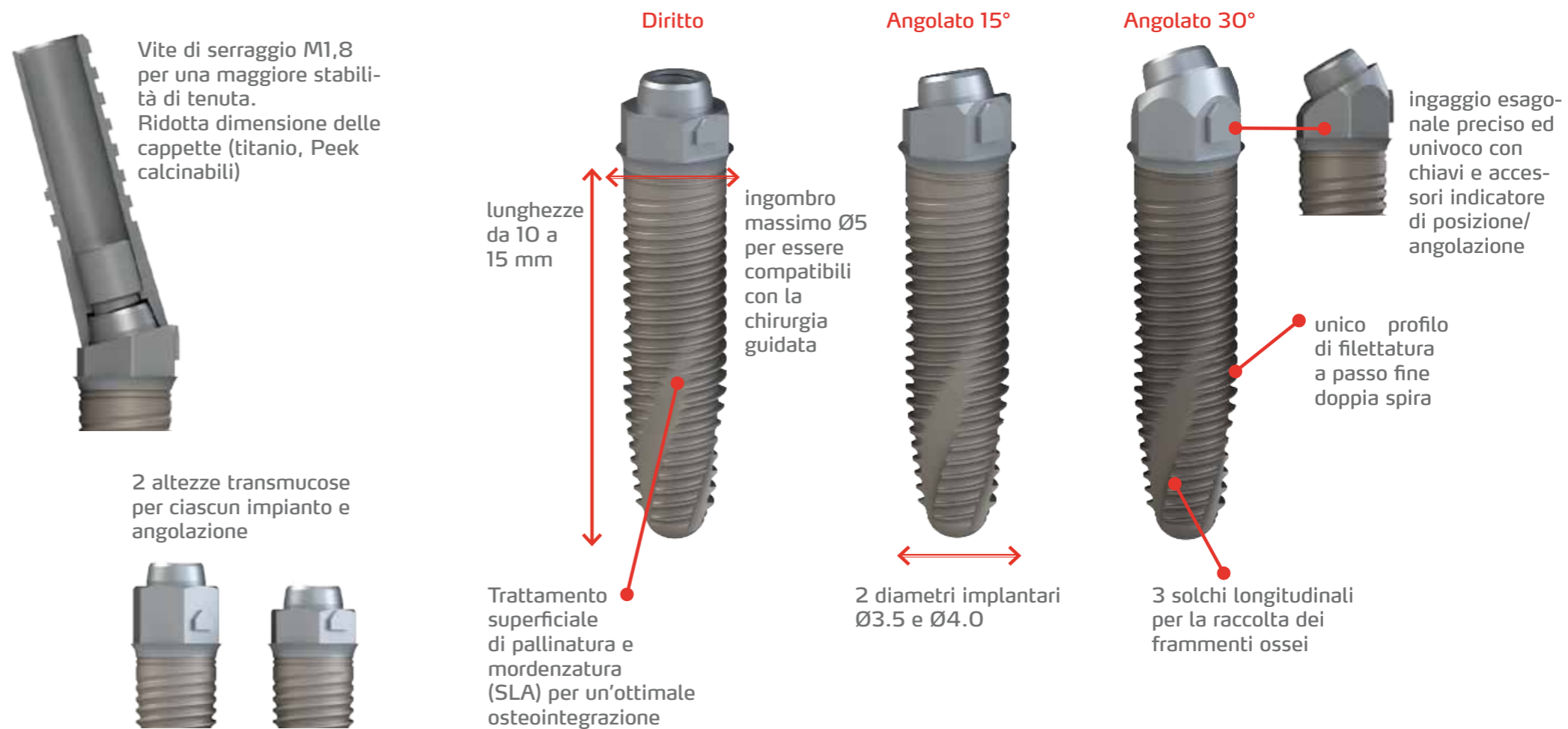

# EasyDip® + Mua

Inserimento 4 impianti EasyDip®

CARICO IMMEDIATO  
Scelta e inserimento MUA

CARICO DIFFERITO  
Sutura lembi e attesa  
guarigione

Preso impronta

Progettazione protesi  
serraggio cappette  
con viti M1,4 e  
posizionamento struttura

LAVORO FINITO

Ingombro Ø 6 mm

# EasyPiece®

Inserimento 4 impianti EasyPiece®

Preso impronta

Progettazione protesi  
serraggio cappette  
con viti M1,8 e  
posizionamento struttura

LAVORO FINITO

Ingombro Ø 3,5 mm

Risparmia tempo con  
**EasyPiece®**  
in chirurgia tradizionale  
ma anche in chirurgia guidata.





Via Lucania, 23  
20090 Buccinasco  
(Milano) Italy

+39 02 45 71 29 09  
[www.overmed.eu](http://www.overmed.eu)  
[info@overmed.eu](mailto:info@overmed.eu)

Numero Verde

**800 492 185**

Assistenza Dentista

Numero Verde

**800 392 315**

Assistenza Laboratorio